

Codice:	PREPAZ23	
Titolo del documento:	RACCOLTA DI FECI per calprotectina ed elastasi pancreatica	
Area:	Laboratorio	Rev. 2 del 19/12/2023

1. CONTENITORE


Le feci per il dosaggio di calprotectina e/o elastasi pancreatica fecale devono essere raccolte attraverso il contenitore rilasciato dal Punto Prelievi, seguendo le annesse istruzioni. Il contenitore deve essere tenuto al di fuori della portata dei bambini. Evitare che il liquido entri in contatto con occhi e mucose.

2. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI

- ATTENZIONE: presenza di 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CAS No.: 2682-20-4). In caso di contatto accidentale con la soluzione acquosa contenuta nel dispositivo, procedere sciacquando abbondantemente la parte interessata e pulendo accuratamente le superfici coinvolte. Consultare uno specialista in caso di contatto con gli occhi o in seguito alla comparsa di reazioni cutanee.
- Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza stampata sulle etichette.
- Il dispositivo può essere conservato a temperatura ambiente (luogo fresco e ombreggiato) e il campione, unavolta raccolto, è stabile fino a 8 ore a temperatura ambiente e fino a 7 giorni a 2-8°C (frigorifero).
- Una volta raccolto il campione non riutilizzare il dispositivo.
- Evitare di raccogliere il campione qualora le feci non siano solide.
- Evitare di contaminare le feci con le urine e l'acqua di scarico.
- Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.

3. MODALITA' DI RACCOLTA

1. Svuotare la vescica poiché l'urina può influenzare il risultato del test.
2. Scrivere sul dispositivo (anche direttamente sulla plastica) cognome, nome e data di nascita.
3. Effettuare la raccolta assicurandosi che il campione non venga a contatto con l'acqua.
4. Tenere il dispositivo con il cappuccio blu rivolto verso l'alto e svitare l'asticella di raccolta.
5. Immergere l'asticella di raccolta nel campione di feci e ripetere la procedura in 3/5 punti diversi del campione fino a quando le scanalature non saranno completamente coperte.
ATTENZIONE: Assicurarsi che tutte le scanalature siano completamente riempite di feci. Non importa se la punta dello stick è ricoperta dalle feci poiché le feci in eccesso saranno rimosse nella fase successiva.
6. Reinserire l'asticella di raccolta nel dispositivo ed avvitare strettamente. Il materiale fecale in eccesso verrà rimosso dall'asticella mediante l'imbuto di gomma.
7. Conservare il dispositivo a temperatura ambiente per un massimo di 8 ore; superato questo tempo, il dispositivo deve essere conservato a 2-8°C per 7 giorni.

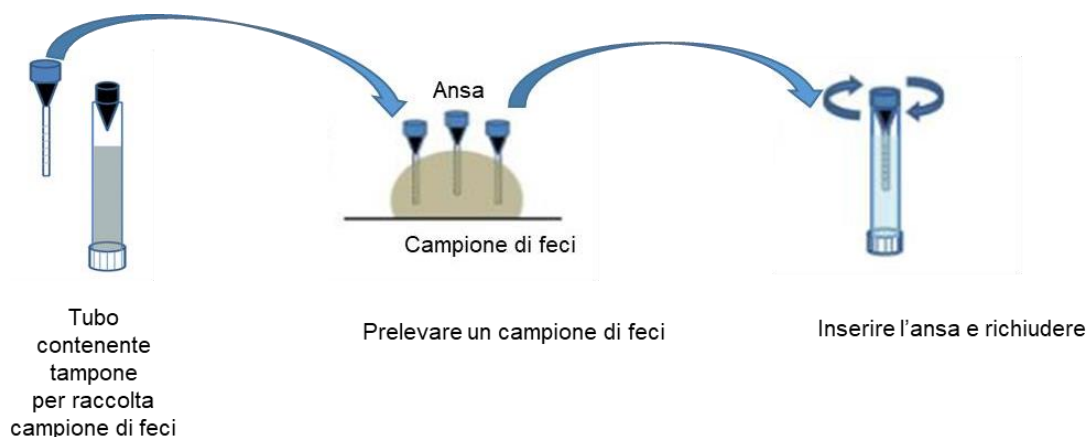

Codice:	PREPAZ23	
Titolo del documento:	FECES COLLECTION per calprotectin and pancreatic elastase	
Area:	Laboratorio	Rev. 2 del 19/12/2023

1. CONTAINER

The feces for the measurement of calprotectin and/or fecal pancreatic elastase must be collected using the container issued by the Collection Point, following the attached instructions. The container must be kept out of the reach of children. Avoid the liquid coming into contact with eyes and mucous membranes.

2. SAFETY PRECAUTION AND RECOMMENDATIONS

- **ATTENTION:** presence of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CAS No.: 2682-20-4). In case of accidental contact with the aqueous solution contained in the device, proceed by rinsing the affected part thoroughly and carefully cleaning the surfaces involved. Consult a specialist in case of contact with eyes or following the appearance of skin reactions.
- Do not use the device after the expiration date printed on the labels.
- The device can be stored at room temperature (cool, shaded place) and the sample, once collected, is stable for up to 8 hours at room temperature and up to 7 days at 2-8°C (refrigerator).
- Once the sample has been collected, do not reuse the device.
- Avoid collecting the sample if the stool is not solid.
- Avoid contaminating feces with urine and waste water.
- It is recommended to place a layer of toilet paper inside the toilet. in order to retain the feces for the time necessary to carry out the sampling.

3. COLLECTION METHODS

1. Empty your bladder as urine can affect the test result.
2. Write on the device (even directly on the plastic) surname, name and date of birth.
3. Carry out the collection making sure that the sample does not come into contact with water.
4. Hold the device with the blue cap facing upwards and unscrew the collection rod.
5. Immerse the collection rod in the stool sample and repeat the procedure in 3/5 different points of the sample until the grooves are completely covered.
CAUTION: Make sure all grooves are completely filled with feces. It does not matter if the tip of the stick is covered in feces as the excess feces will be removed in the next step.
6. Reinsert the collection rod into the device and screw tightly. Excess fecal material will be removed from the dipstick using the rubber funnel.
7. Store the device at room temperature for up to 8 hours; after this time, the device must be stored at 2-8°C for 7 days.

